



Coltolux® LED

Lámpara de LED de alta potencia

Delgada

FÁCIL ACCESO A POSTERIORES
MEJOR VISIBILIDAD

Poderosa

CURADO RÁPIDO

Inalámbrica

PORTÁTIL



La Coltolux LED combina una alta potencia de salida, con una punta de curado delgada en un diseño de "lápiz" ultraliviano e inalámbrico.

- LED de alta potencia para curado rápido: hasta 4 mm de profundidad en 10 segundos.
- Lentes en forma de bóveda para minimizar la dispersión de la luz.
- Rango espectral de luz que coincide con el espectro de absorción del fotoiniciador Canforquinona (CQ).
- Señal sonora cada 10 segundos y corte automático a los 60 segundos de operatoria para ahorro de energía.
- Cientos de curados con la batería cargada.

CURADO DE TONALIDADES CLÁSICAS (2mm de profundidad)

FABRICANTE	MARCA	TONALIDAD	MENOS DE 10" DE CURADO
3M	Z100*	A2, C4	Sí
3M	Z100*	Cervical Yellow	Sí
3M	Filtek*	A2, C2	Sí
Coltène	Brilliant*	A2, A3.5, D3	Sí
Coltène	Synergy*	DuoShade	Sí
Coltène	Miris*	Dentin & Enamel	Sí
Dentsply	Esthet-x*	A2	Sí
Kerr	Herculite*	C3, D4	Sí
Kerr	Herculite*	Cervical Yellow	Sí
Ivoclar	Heliomolar*	A2	Sí

Punta de Curado más Delgada*



INFORMACIÓN TÉCNICA:

Pieza de mano	
Rango de longitud de onda:	450 nm 470 nm
Pico de longitud de onda:	460 nm
Intensidad de luz:	1400 mW/cm ²
Diámetro del dispositivo de luz:	9.0 mm
Profundidad de curado a 10":	4.0 mm

PUNTA DE CURADO MAS DELGADA*


Dimensiones	
Punta de curado:	.50" (1.3 cm) diámetro
Cuerpo:	1.0" (2.5 cm) diámetro
Largo:	8.7" (22 cm) largo
Peso:	2.2 onzas (100 gramos)

Fuente de alimentación

Voltaje de entrada:	90-260 vac
---------------------	------------

* Vs. las dos primeras marcas con puntas de curado no removibles. Synergy, Miris, Brilliant y Coltolux LED son marcas registradas de Coltène/Whaledent Inc. Las otras marcas no son marcas registradas de Coltène/Whaledent Inc.

MÁS POTENCIA

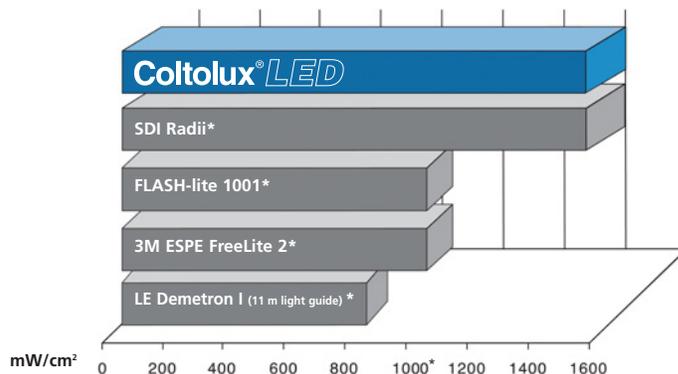

Información Para el Pedido

Cat. No.

Pieza de mano, base de carga, fuente de alimentación, 3 protectores de luz, 2 lentes de luz, 100 cubiertas plásticas.	C7970
Sólo fuente de alimentación	C7973
25 lentes de luz	C7974
1000 cubiertas plásticas	C7957
100 protectores de luz	C7944

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223 / USA
Tel. USA & Canada 1 800 221 3046
+1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info@coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel. +41 (0) 71 757 53 00
Fax +41 (0) 71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Authorized EU Representative:

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau / Germany
Tel. +49 (0) 7345 805 0
Fax +49 (0) 7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

Made in USA

coltène
whaledent